



# YOSHIOKA

大動脈内バルーンポンピング用カテーテル  
Qタイプ QSタイプ

 株式会社  
東海メディカルプロダクツ

承認番号：07B-第0473号

製品名：「吉岡式 IABP バルーン」

保険請求分類：「バルーンポンピング用バルーンカテーテル」

(II) 一般用末梢循環温存型

# YOSHIOKA

Qタイプ QSタイプ

適応ガイディングカテーテル径※1  
Recommended Guiding Catheter Diameter

7Fr $\geq$

6Fr $\geq$

バルーンサイズ  
Balloon Size

M

パンピング駆動容量  
Pumping Volume

35cc

IABPバルーン全長※2  
Balloon Length

195mm

IABPバルーン外径  
Balloon Diameter

15.5mm

カテーテルシャフト外径  
Outer Catheter Diameter

12.5Fr

11.5Fr

セントラルルーメン内径  
Central Lumen Diameter

7.8Fr

6.6Fr

カテーテル適応シース径※3  
Recommended Sheath Diameter

13Fr

12Fr

適応ガイドワイヤーサイズ  
Recommended Guidewire Size

0.035inch

バルーンカテーテル挿入長  
Insertion Catheter Length

640mm

バルーン適応身長※4  
Recommended Patient Height

160cm~140cm

製品番号  
Product Number

Y-02

注文番号  
Order Number




Q35

QS35

- ※1 ガイディングカテーテルの形状により、セントラルルーメンを通過しにくい場合があります。
- ※2 ガイディングカテーテルの操作を確保するため、通常製品に比べ短く(当社比)なっております。
- ※3 シースレス挿入仕様となっておりますが、バルーンカテーテル挿入困難時の場合を想定し側孔付き・止血弁付きシースを同梱してあります。
- ※4 血管走行状態により、腹腔動脈分岐部閉塞やシャフトキンクの恐れがあります。

## 梱包内容

バルーンカテーテル本体、一方栓、ロングダイレーター(Qタイプ:7Fr, QSタイプ:6Fr)、ダイレーター(Qタイプ:11Fr, QSタイプ:10Fr)、穿刺針(19G)、シリンジ(50cc)、延長チューブ(160cm)、各社対応駆動機コネクター(Datoscope社製、Arrow International社製、AISIN社製)、親水性ガイドワイヤー(アングル型0.035inch 145cm)、シースダイレーターセット(Qタイプ:側孔付き・止血弁付20cm13Frシース&12Frダイレーター, QSタイプ:側孔付き・止血弁付20cm12Frシース&11Frダイレーター)

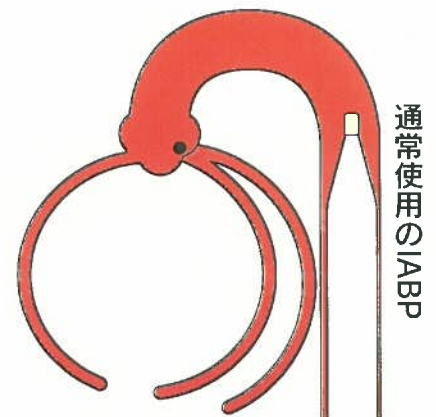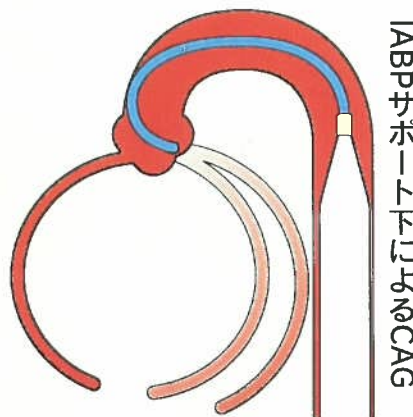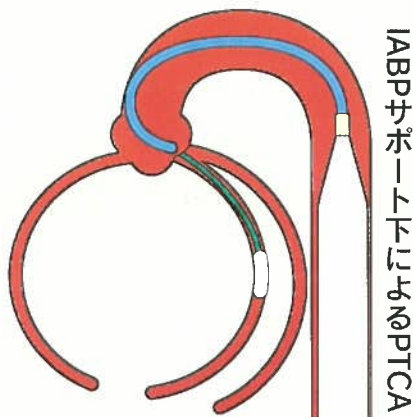

製造販売元・販売元

販売代理店



株式会社  
東海メディカルプロダクツ

TEL ☎ 486-0808

愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

TEL ☎ (0568) 81-7954

FAX ☎ (0568) 81-7785

URL 🌐 <http://www.tokaimedpro.co.jp>

E-mail 📧 [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)