

**MOIYAN**

バルーン付カテーテル

**MOIYAN**

**BALLOON CATHETER**








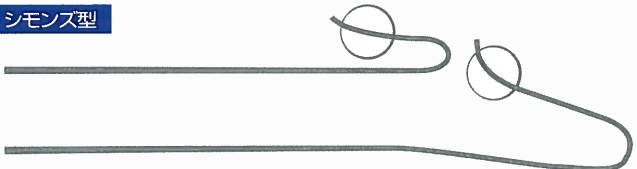



血管留置閉塞用



## バルーン付カテーテル

### 特徴

- カテーテルの肉薄化(Thin wall)に成功しました。
- レギュラーバルーンタイプはすべてシャフト外径5Fr、0.035インチのガイドワイヤー対応です。
- バルーン部に段差がなく、シャフトと同サイズのシースが対応可能です。
- 先端部の柔軟構造は、カテーテルの挿入性向上と血管へのストレス軽減を可能にしました。
- Nタイプ(品番末尾のアルファベット表記)は、マイクロカテーテルの使用が可能です。

基本形状一覧	
<b>ストレート型</b> 	<b>ヘッドハンター型</b> 
<b>コブラ型</b> 	<b>BHW型</b> 
<b>RC-1型</b> 	<b>マルチパーパス型/アングル型</b> 
<b>RC-2型</b> 	<b>シモンズ型</b> 
<b>RH型</b> 	<b>BRTO用</b> (Type大分-5-30N)  (ST-5-80LB) 

**【オーダーについて】:品番表記例** 品番表記は以下の内容に基づいて構成されております。詳細はウラ面のカタログNo.を参照下さい。

先端形状略称 - シャフトFrサイズ - カテーテルシャフト有効長  
※一部表記の20,25はバルーンφ

### 【品番末尾の略称について】

N (ニューバルーン)    マイクロカテーテル使用可能、バルーン基準径11mm    DB (ディスタルバルーン) 下記のイラスト参照。  
 LB (ラージバルーン)    一部品番の末尾に付加。20~30mmのバルーンφ    -S (ソフトシャフト)    標準品よりも軟らかめの材質を使用しております。

### 【バルーンのノーマルタイプとディスタルバルーン(DB)タイプについて】



# カテーテルの特性

※参考データ



サイズ(Fr)		5	6
素 材		ポリエチレン 2ルーメン	ポリエチレン トルク2ルーメン
寸法 (mm)	外径	1.70	2.00
	内径	1.10	1.02
	エアルーメン	0.30	0.30
	全長	1,200	1,200
ブレード	線径(mm)	-	0.06
	本数	-	32
	ピッチ	-	6.0
トルク値 (g-cm)	1/2回転	10	65
	-回転	25	100

# 流量 Flow-Rate(PSI)

※参考データ

サイズ(Fr)	内径(mm)	全長(cm)	流量(ml/sec)										
			4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	
5	1.10	65	135	169	211	253							
		80	162	206	240	281							
		100	198	243	286	314							
6	1.02	65			211	307	389	504	611	739	834	1013	
		80			249	317	442	588	721	840	983		
		100			295	372	583	694	775	911			

※造影剤…ウログラフィン・76%・37°C    ※Injector…根本杏林堂・M-800C    ※形状…ストレート

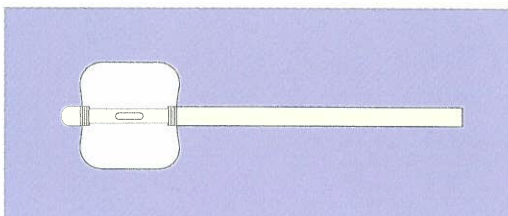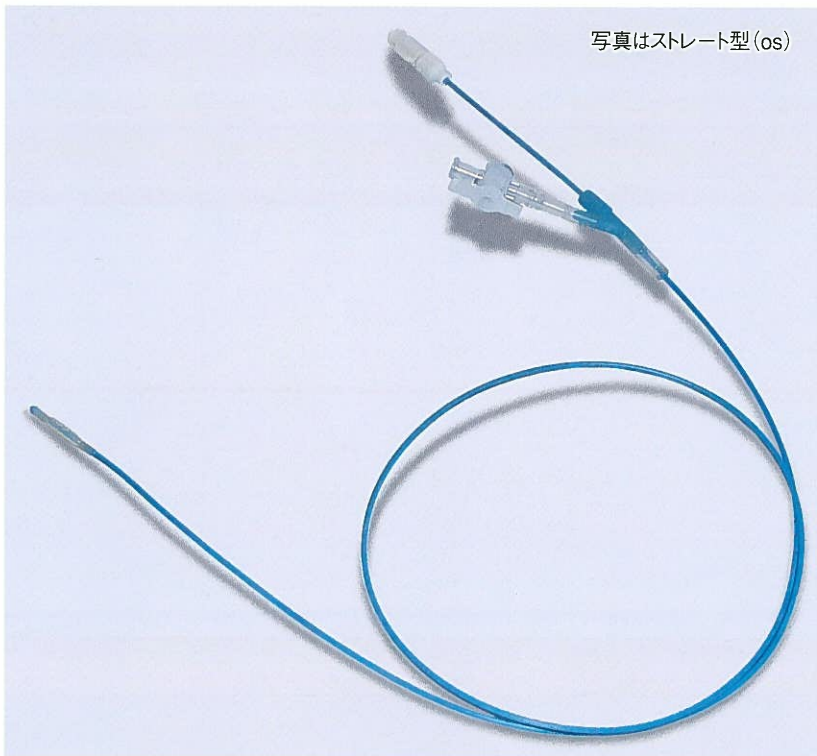

## ■使用上の注意

- 1.炭酸ガスの使用をお勧めします。
- 2.使用前に規定量の1/2でテストしてください。
- 3.使用期限は滅菌日から1年半後です。
- 4.滅菌袋に異常がある場合は、使用しないでください。
- 5.ご使用は1回限りとしてください。
- 6.通常の室温で保管し、直射日光にさらさないでください。

# MOIYAN オクリュージョンカテーテル

## レギュラーバルーンタイプ

コブラ型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	C-5-65	5Fr	8mm	0.6cc
	C-5-65N	5Fr	11mm	1.0cc
	C-5-80	5Fr	8mm	0.6cc
	C-5-80N	5Fr	11mm	1.0cc
	C-5-80N-S	5Fr	11mm	1.0cc
	C-5-80DB	5Fr	8mm	0.6cc
	C-5-90N	5Fr	11mm	1.0cc
RC-1型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	RC1-5-80	5Fr	8mm	0.6cc
	RC1-5-80N	5Fr	11mm	1.0cc
RC-2型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	RC2-5-65N	5Fr	11mm	1.0cc
	RC2-5-80	5Fr	8mm	0.6cc
	RC2-5-80N	5Fr	11mm	1.0cc
	RC2-5-80N-S	5Fr	11mm	1.0cc
RH型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	RH-5-80	5Fr	8mm	0.6cc
	RH-5-80N	5Fr	11mm	1.0cc
ストレート型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	ST-5-100	5Fr	8mm	0.6cc
	ST-5-100N	5Fr	11mm	1.0cc
	ST-5-65N	5Fr	11mm	1.0cc
	ST-5-80	5Fr	8mm	0.6cc
	ST-5-80N	5Fr	11mm	1.0cc
	KT-5-120	5Fr	8mm	0.6cc

マルチバース型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	MP-5-70N	5Fr	11mm	1.0cc
シェパードフック型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	SH-5-65N	5Fr	11mm	1.0cc
	SK-5-70	5Fr	8mm	0.6cc
ヘッドハンター型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	H1-5-100	5Fr	8mm	0.6cc
	H1-5-100N	5Fr	11mm	1.0cc
	H1-5-100DB	5Fr	8mm	0.6cc
ペンノンハナファイ型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	BHW-5-100	5Fr	8mm	0.6cc
	BHW-5-100N	5Fr	11mm	1.0cc
シモンズ型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	SIM1-5-110	5Fr	8mm	0.6cc
	SIM2-5-110	5Fr	8mm	0.6cc
	MS-5-90N	5Fr	11mm	1.0cc
ニュートン型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	TypeHN5-5-100	5Fr	8mm	0.6cc
アングル型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	AG-5-100	5Fr	8mm	0.6cc

## ラージバルーンタイプ

ストレート型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	OS20-5-80 (0.038")	8Fr	20mm	5.0cc
	OS20-5-80DB(0.038")	8Fr	20mm	5.0cc
	OS25-5-80 (0.038")	8Fr	25mm	8.0cc
	ST20-5-80N (0.038")	7Fr	20mm	8.0cc
	ST-6-80LB (0.038")	10Fr	30mm	18.0cc
コブラ型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	C20-5-80N	8Fr	20mm	5.0cc
	CM20-6-80	8Fr	20mm	5.0cc
逆ツイスト型	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	逆ツイスト6-80	8Fr	25mm	8.0cc
BRTO用	カタログNo.	対応シース(Fr)	バルーンΦ (max)	バルーン容量 (max)
	ST-5-80LB (0.038")	10Fr	30mm	18.0cc
	TYPE大分5-80N	8Fr	25mm	8.0cc

販売名:バルーン付カテーテル(MOIYAN)  
 一般的名称:中心循環系閉塞術用血管内カテーテル  
 高度管理医療機器(クラス4)  
 単回使用  
 承認番号:21500BZZ00737000  
 特定保険医療材料機能区分:  
 血管内手術用カテーテル・オクリュージョンカテーテル・標準型

製造販売元

**株式会社  
東海メディカルプロダクツ**

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町更屋敷1485  
 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

販売元

**東京宮野器械株式会社**

〒113-0034 東京都文京区湯島2-16-7  
 TEL 03-3816-4575 FAX 03-3814-1566

**宮野医療器株式会社**

〒564-0002 大阪府吹田市岸部中2-2-13  
 TEL 06-6378-2581 FAX 06-6378-2572